

SILVERFOX

Magnifying lamp leds

1005

Magnifying lamp leds

- **WELCOME!**

Thank you very much for your purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the instrument correctly. The company accepts no responsibility for accidents occurring due to incorrect operation.

The company reserves the right to amend the details of the instruments with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.

- **Warning**

- Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components or accessories of the machine. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.
- Never use the unit in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms etc. to prevent damage to the electrical components of your unit.
- Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.
- If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards, or contact the dealer for service.

- **EC-Declaration of compliance**

This product meets the following requirements:

1. Conditions set out in the Low Voltage Directive: 2014/35/EU
2. Conditions set out in the Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU


- **Recycling**

Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve save natural resources and improve standards of environmental protection in regard to the treatment of electrical waste.

- **Instructions of use**

Assemble the base according to the sketch shown below:

1. Insert the lamp into the base.
2. Connect the power supply.
3. Turn on "POWER" button.
4. Open the plastic cover and align the magnifying lamp with the treatment zone.
5. Adjust the distance between the lamp and the skin.
6. Adjust the brightness to a good level.
7. Once the distance is properly adjusted you can proceed with skin with the skin analyze or other treatments.

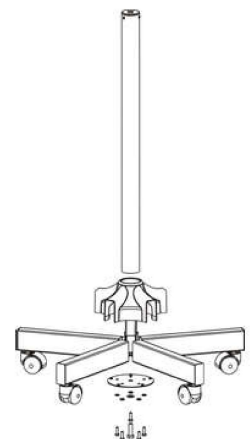

- **Caution**

- During treatment, if brightness needs to be adjusted, please make sure hands are dry and avoid liquid goes into adjustment button.

- **Maintenance**

- If there is dust on the lamp glass, clean it with a special soft glass paper and no other material, because it could give damage the glass.

Lámpara lupa led

- **¡Bienvenido!**

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto.

La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.

- **Advertencia**

- Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado.
- No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de baño, baños, etc., con el fin de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo.
- Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.
- Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.

- **Declaración de conformidad CE**

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2014/35/EU
2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2014/30/EU

- **Reciclaje**

Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

- **Instrucciones de uso**

Assemble the base according to the sketch shown below:


1. Coloque la lámpara en la base.
2. Conecte la fuente de alimentación.
3. Encienda el botón "POWER".
4. Abra la tapa de plástico y alinee la lámpara de aumento con la zona de tratamiento.
5. Ajuste la distancia entre la lámpara y la piel.
6. Ajuste el brillo a un buen nivel.
7. Una vez que la distancia esté correctamente ajustada se puede proceder al análisis de la piel u otros tratamientos.

- **Precaución**

- Durante el tratamiento, si el brillo es necesario ajustar, por favor asegúrese de que las manos estén secas y evite que el líquido entre en el botón de ajuste.

- **Mantenimiento**

- Si hay polvo en el cristal de la lámpara, límpiela con un papel especial de vidrio suave y ningún otro material, ya que podría dañar el cristal.

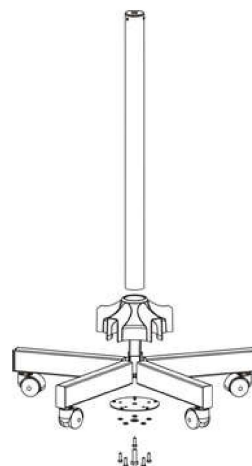

Lampe loupe à leds

• Bienvenue!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.

L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

• Avertissement

- N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contacter votre fournisseur ou un technicien qualifié.
- N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.
- N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

• Déclaration de conformité CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

Ce produit répond aux exigences suivantes:

1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2014/35/EU
2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2014/30/EU


• Recyclage

Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

• Mode d'emploi

Assemblez la base selon le schéma ci-dessous:

1. Insérez la lampe dans la base.
2. Connectez l'alimentation.
3. Tournez le bouton "POWER".
4. Ouvrez le couvercle en plastique et alignez la lampe loupe avec la zone de traitement.
5. Ajuster la distance entre la lampe et la peau.
6. Réglez la luminosité à un bon niveau.
7. Une fois la distance correctement réglée, vous pouvez procéder à l'examen de la peau.

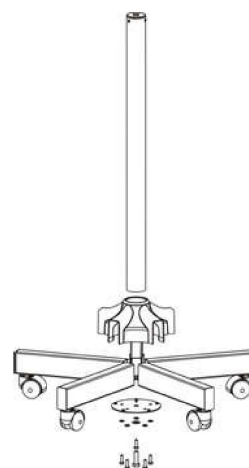

• Cautions

- Pendant le traitement, si il est nécessaire d'ajuster la luminosité, s'il vous plaît assurez-vous que vos mains sont sèches et assurez-vous que le liquide n'entre pas dans le bouton de réglage.

• Maintenance

- S'il y a de la poussière sur le verre de la lampe, nettoyez-le avec un papier de verre doux spécial et aucun autre matériau, car il pourrait endommager le verre.

Led lupenleuchte

• Willkommen!

Vielen Dank für Ihren Kauf! Bitte lesen Sie die Anleitungen gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie können auch Ihren Fachbetrieb um eine Einweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig einsetzen. Wir haften nicht für Unfälle, die aufgrund fehlerhafter Bedienung entstehen.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen der Geräte ohne vorherige Ankündigung vor. Wenn Sie in diesen Anleitungen Fehler finden, bitte senden Sie uns eine E-Mail, damit wir diese berichtigen können.

• Warnung

- Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen und die innen liegenden Komponenten oder Zubehör zu untersuchen. Wenn eine Kontrolle notwendig wird, setzen Sie sich dafür mit Ihrem Lieferanten oder einem kompetenten Techniker in Verbindung.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in feuchter oder unbelüfteter Umgebung, wie z.B. Feuchträume oder Badezimmer, um Schaden an den elektrischen Komponenten Ihres Geräts zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien, Witterungseinflüsse können Schäden verursachen.
- Wenn die elektrische Zuleitung beschädigt ist, lassen Sie diese von einem Fachmann kontrollieren und austauschen, um Risiken zu vermeiden, oder bitten Sie den Händler um Kundendienstleistungen.

• EC Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

1. Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU
2. Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EU


• Recycling

Dieses Symbol auf unseren elektrischen Geräten und auf ihren Verpackungen bedeutet, dass diese Produkte in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für die Entsorgung beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften oder die Anforderungen für die Entsorgung von elektrischen Geräten. Diese Initiative zur Entsorgung von Elektromüll hilft die natürlichen Ressourcen zu erhalten und dient einem besseren Umweltschutz.

• Gebrauchs

Montieren Sie das Basiselement wie in der Abbildung unten angezeigt:

1. Setzen Sie die Lampe in das Basiselement ein.
2. Stecken Sie das Stromkabel ein.
3. "POWER" - Knopf einschalten.
4. Öffnen Sie die Plastikabdeckung und positionieren Sie die Lupenleuchte entsprechend der Behandlungszone.
5. Regulieren Sie die Entfernung zwischen Lampe und Haut.
6. Regulieren Sie die Helligkeit auf ein angemessenes Niveau.
7. Sobald der Abstand richtig eingestellt ist, können Sie mit der Hautprüfung oder anderen Behandlungen beginnen.

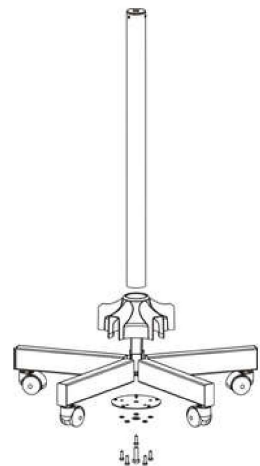

• Vorsicht

- Sollte die Anpassung der Helligkeit während der Behandlung notwendig werden, stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind und vermeiden Sie, dass Wasser an den Regulierungsknopf gelangt.

• Wartung

- Sollte das Lampenglas verstaubt sein, reinigen Sie es mit speziell weichem Papier für Glas, nicht mit anderen Materialien, sonst könnte das Glas beschädigt werden.