


Lámpara analizador de piel

Skin Analyzer Lamp

Lampe analyseur de peau

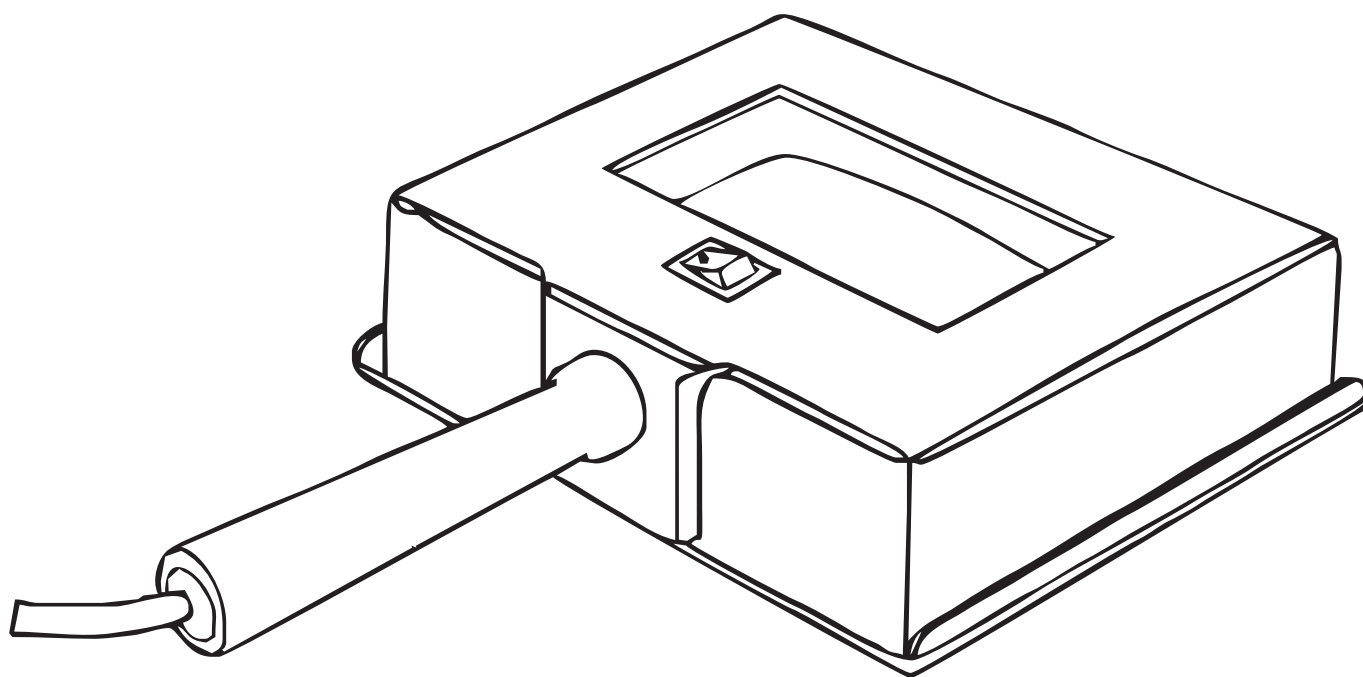

Lámpara analizador de piel

Descripción – Lámpara Analizadora de Piel

La lámpara analizador de piel portátil se utiliza por el esteticista para ayudar a analizar las condiciones de la piel. Diferentes sustancias se vuelven luminosas cuando se exponen a los rayos violeta intensos de la lámpara analizadora, permitiendo examinar tanto la superficie como las capas más profundas de la piel en una habitación completamente oscura.

Los rayos violetas permiten al esteticista identificar diversas condiciones cutáneas. A continuación se presentan algunos ejemplos de condiciones de la piel y cómo aparecen bajo la lámpara analizadora.

Cómo usar

1. Limpia la tapa protectora y la lente. Al limpiar, asegúrate de que el agente de limpieza utilizado no dañe la pintura ni las piezas de plástico, y garantice la máxima salida fotométrica.
2. Antes de usar, aplica un cepillo de masaje para limpiar la superficie de la piel.
3. Conecta el cable de alimentación de la lámpara analizador a la fuente de energía, presiona el interruptor y la luz se encenderá después de unos segundos.
4. Durante el uso, el instrumento debe mantenerse a una distancia de 5 a 6 cm de la superficie de la piel del paciente.
5. Observa a través de la lupa en una habitación oscura.

Nota: No permitas que la lámpara analizador se sobrecaliente y evita el contacto directo del tubo con la piel.

Condiciones de la piel según la lámpara analizador

Color observado	Condición de la piel	Color observado	Condición de la piel
Azul blanquecino	Piel normal y saludable	Amarillo o a veces rosa	Zonas grasas del rostro y comedones
Fluorescencia brillante	Piel hidratada	Marrón	Pigmentación y manchas oscuras
Fluorescencia púrpura	Piel fina y con falta de humedad	Manchas blancas	Capa córnea de la piel y células muertas
Violeta Claro	Piel deshidratada	Fluorescencia blanca	Capa córnea gruesa

Cobertura no garantizada

- Uso por accidente o error y daños causados por actividad humana.
- Reparaciones inadecuadas por personal no autorizado y modificaciones no autorizadas que causen fallos.
- Daños y fallos causados por fuerza mayor o desastres naturales.

Introduction to Magnifier Lamp

Description - Skin Analyzer LAMP

The portable skin analyzer lamp is used by the esthetician to help analyze skin conditions. Different substances become luminous when exposed to the deep violet rays of the analyzer's lamp analyze the surface and deeper layers of skin in a totally dark room. The violet rays enable then esthetician to various skin conditions. Following are some example of skin conditions and how they appear under the analyzer's lamp.

How To Use

- 1) Clean the protective cover and lens; When cleaning, please ensure that the cleaning agent used will not damage the paint and plastics and ensure the maximum photometric output.
- 2) Before use, apply a massage brush to clean the skin surface.
- 3) Connect the power cord of analyzer lamp to the power supply, press the switch and the light will be on after a few seconds.
- 4) When using analyzer lamp, the instrument should be kept at a distance of 5-6 cm from the skin surface of the patient.
- 5) Wheck through a magnifying glass in a dark room.

Note: analyzer lamp are not allowed to overheat and avoid direct contact with the tube and skin.

Analyzer's LAMP Presents Skin Condition

Analyzer's lamp Indication	Shin Condition
Blue white	Normal and healthy skin
Bright fluorescent	Hydrated skin
Purple fluorescent	Thin skin without enough moisture
Light violet	Dehydrated skin

Analyzer's lamp Indication	Shin Condition
Yellow or sometimes Pink	Oily areas of the face and come done
Brown	Pigmentation and dark spots
White spots	Horniness layer of the skin and dead cells
White fluorescence	Thick conium layer

Non-guaranteed coverage

- Use by accident or error and damage caused by human activity
- Improper repairs by unauthorized personnel and unauthorized modifications caused faults
- Damage and failure caused by force majeure natural disasters

Lampe analyseur de peau

Description – Lampe Analyseur de Peau

La lampe analyseur de peau portable est utilisée par l'esthéticien(ne) pour aider à analyser les conditions de la peau. Différentes substances deviennent lumineuses lorsqu'elles sont exposées aux rayons violets profonds de la lampe analyseur, permettant d'examiner la surface et les couches plus profondes de la peau dans une pièce totalement sombre.

Les rayons violets permettent à l'esthéticien(ne) d'identifier différents types de conditions cutanées. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de ces conditions et leur apparence sous la lampe analyseur.

Mode d'emploi

1. Nettoyez le couvercle de protection et la lentille. Lors du nettoyage, assurez-vous que le produit utilisé n'endommage ni la peinture ni les pièces en plastique, et garantisse le rendement lumineux maximal.
2. Avant l'utilisation, appliquez une brosse de massage pour nettoyer la surface de la peau.
3. Branchez le cordon d'alimentation de la lampe analyseur sur la source d'alimentation, appuyez sur l'interrupteur et la lumière s'allumera après quelques secondes.
4. Pendant l'utilisation, l'appareil doit être maintenu à une distance de 5 à 6 cm de la surface de la peau du patient.
5. Observez à travers la loupe dans une pièce sombre.

Remarque : Ne laissez pas la lampe analyseur surchauffer et évitez tout contact direct du tube avec la peau.

Conditions de la peau selon la lampe analyseur

Couleur observée	Condition de la peau
Bleu blanchâtre	Peau normale et saine
Fluorescence brillante	Peau hydratée
Fluorescence violette	Peau fine et manquant d'humidité
Violet clair	Peau déshydratée

Couleur observée	Condition de la peau
Jaune ou parfois rose	Zones grasses du visage et comédons
Marron	Pigmentation et taches foncées
Taches blanches	Couche cornée de la peau et cellules mortes
Fluorescence blanche	Couche cornée épaisse

Couverture non garantie

- Utilisation par accident ou erreur et dommages causés par une activité humaine.
- Réparations inappropriées par du personnel non autorisé et modifications non autorisées ayant causé des pannes.
- Dommages et défaillances causés par la force majeure ou des catastrophes naturelles.