

IDIOMA: DE
MARCA: VIBBEL
MODEL: RUKBA
HZ-3805
Elektrische Spa-Liege

1. Wir von DDUUEETT EUROPE S. L. danken Ihnen für Ihr Vertrauen beim Kauf von Vibbel-Produkten. Wir hoffen, dass diese Bedienungsanleitung Ihnen hilft, dieses Produkt optimal zu nutzen.
Sollten Sie noch Fragen zur Verwendung und/oder Funktion haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

2. VOR ALLEM

- 2.1. Lesen Sie sich bitte die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Beachten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnhinweise.
- 2.2. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung stets auf und händigen Sie bei der Weitergabe des Geräts die Bedienungsanleitung aus, da diese ein wesentlicher Bestandteil des Produkts ist.
- 2.3. Einige Komponenten des Produktes können von den Abbildungen in Katalogen, im Web, in Unternehmensbroschüren usw. abweichen.
- 2.4. Um Verbesserungen am Produkt vorzunehmen, behält sich der Hersteller das Recht vor, dessen Merkmale und/oder Komponenten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

3. KORREKTE NUTZUNG DES GERÄTS

- 3.1. Dieses Produkt wurde für die Verwendung durch Fachleute auf dem kosmetischen Sektor in kosmetischen Kliniken entwickelt und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- 3.2. Bitte beachten Sie, dass jeder unsachgemäße Gebrauch des Geräts zum Verlust der Garantie führt.
- 3.3. Nehmen Sie ohne Genehmigung von DDUUEETT EUROPE S. L. keine Änderungen am Gerät vor.
- 3.4. DDUUEETT EUROPE S. LI haftet nicht für materielle oder persönliche Schäden, die auf den Missbrauch des Produkts zurückzuführen sind.

4. VORSICHTSMASSNAHMEN

- 4.1. Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch das Gerät und das Netzkabel auf Beschädigungen.
- 4.2. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie mit der Reinigung oder Wartung beginnen.
- 4.3. Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien oder an Orten, an denen es durch Feuchtigkeit oder schlechtes Wetter beeinträchtigt werden kann.
- 4.4. Wenn das Stromversorgungskabel defekt ist, ziehen Sie sofort den

Netzstecker und informieren Sie Ihren Händler oder einen spezialisierten Techniker.

- 4.5. Positionieren Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und schließen Sie es an eine geerdete Steckdose an.
- 4.6. Trennen Sie das Gerät täglich am Ende des Arbeitstages vom Netz und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- 4.7. Wenn Sie eine Störung beim Betrieb des Produkts feststellen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen spezialisierten Techniker.

5. SICHERHEITSHINWEISE

- 5.1. Das Gerät und das Zubehör müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- 5.2. Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an. Die lokale Netzspannung muss den technischen Daten des Gerätes entsprechen.
- 5.3. Die Steckdose muss zugänglich sein, wenn Sie das Gerät zu einem bestimmten Zeitpunkt schnell vom Netz trennen müssen.
- 5.4. Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Netzkabel.
- 5.5. Berühren Sie niemals elektrische Komponenten oder öffnen oder reparieren Sie keine Komponenten des Gerätes.
- 5.6. Das Gerät darf nur von Ihrem Händler oder einem spezialisierten Techniker repariert werden.
- 5.7. Starten Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät selbst oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen.
- 5.8. Berühren Sie das Gerät oder das Netzkabel auf keinen Fall mit nassen Händen.
- 5.9. Bringen Sie niemals Ihre Hände oder sonstige Körperteile während des Betriebs in eine Öffnung oder einen Hohlraum der Transportbahre.


6. INHALT DER VERPACKUNG

- 6.1. Elektrische Spa-Liege x 1 St.
- 6.2. Kissen x 1 St.
- 6.3. Armlehne x 2 St.
- 6.4. Papierrollenhalter x 1 St.
- 6.5. Bedienungsanleitung x 1 St.

7. TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	187x72-95x67-85 cm
Nettogewicht	61 kg
Max. Belastbarkeit	150 kg
Motoren	1
Polsterung	PU
Spannung	220-240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz

8. SKIZZE UND ABMESSUNGEN

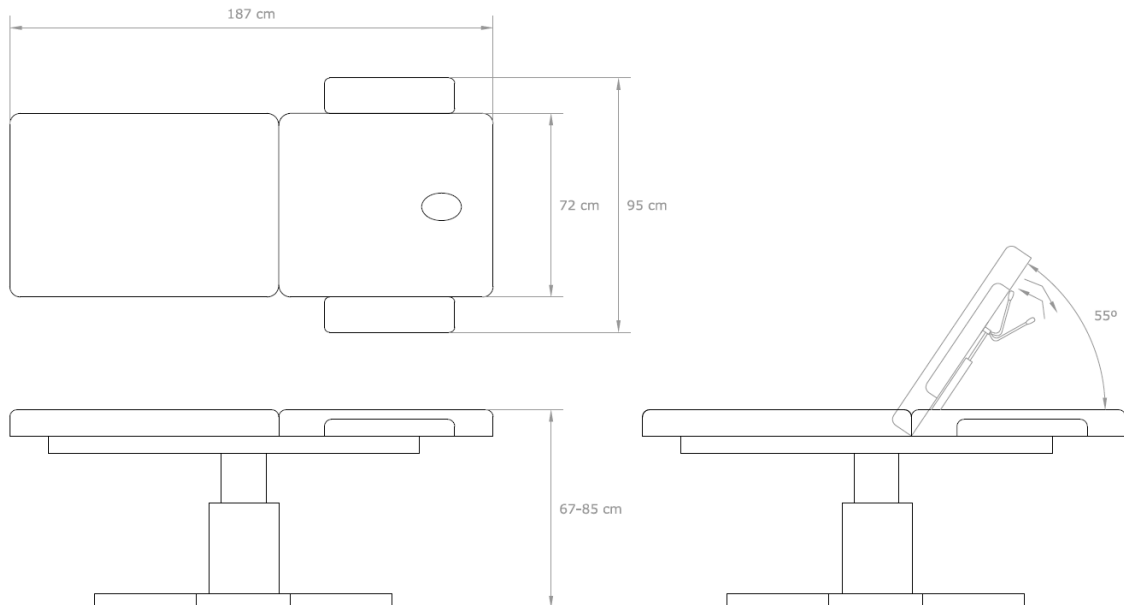

9. MONTAGEANLEITUNGEN

- 9.1. Setzen Sie die Armlehne in der richtigen Position ein, sodass der Stift in das Kunststoffteil des Körpers der Trage passt, und drücken Sie sie bis zum Anschlag hinein.
- 9.2. Führen Sie den gleichen Vorgang an beiden Armlehnen durch.
- 9.3. Platzieren Sie den Rollenpapierhalter in der angegebenen Position. Ziehen Sie die Flügelmutter fest an.

10. BETRIEB

- 10.1. Schließen Sie die Transportbahre mit dem Netzkabel an eine Steckdose an.
- 10.2. Verwenden Sie die Druckknöpfe  und  der Fernbedienung, um die Höhe der Trage einzustellen.
- 10.3. Um die Gasfeder zu aktivieren, betätigen Sie den Hebel an der Rückseite der Rückenlehne, der die Bewegung der Rückenlehne ermöglicht. Wenn der Hebel losgelassen wird, bleibt die Rückenlehne in der Position, in der sie eingestellt wurde.

11. REINIGUNG UND WARTUNG

- 11.1. Vor Reinigung des Gerätes ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.
- 11.2. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine Flüssigkeiten.
- 11.3. Wenden Sie sich zur Wartung oder Reparatur eines Teils des Produkts an Ihren Händler oder einen spezialisierten Techniker.

12. RECYCLING

Wenn Sie das Produkt, Teile oder Zubehör entsorgen müssen, halten Sie sich bitte an die für die Abfallentsorgung und den Umweltschutz geltenden Gesetze und Vorschriften.